

CURAPROX

TONGUE CLEANER

舌苔等のバクテリアを取り除き
口腔内の特有のむかつきなどを押さえます

クラプロックス 舌ブラシ CTC 202

色がカラフルなので、
ブラシに付いた舌苔を確認できます



※ 商品カラーは変更になる場合がございます。

樹脂製なので水洗いで
かんたんに汚れを落とせます



ブラシと持ち手が一体型なので
力がダイレクトに伝わり
力加減が調整しやすくなっています

くり返しご使用いただけます



舌ブラシの
正しい使い方はこちら！
curaprox.shop/use/



curaden

better health for you

株式会社クラデンジャパン



TONGUE CLEANER

普段に歯みがきに舌ブラシをプラス 1日1回、3ストロークでOK

舌ブラシを使ったことはありますか？

お口の健康を守るのは歯ブラシだけではありません。

舌ブラシは、舌苔(ぜったい)など舌の汚れをかんとんに取り除くことができます。

口臭が気になる方にもおすすめです。



もともと舌が綺麗で汚れにくい人もいます。感じ方は個人差があります。舌はデリケートですので、力の入れすぎ、使いすぎはご注意ください。

1 SOFT TOUCH

力を入れずに優しく持つ


力を入れず、軽くつまむように肢の部分を持ち、舌の上にブラシを乗せます。



2 3 STROKE

3ストロークでみがく

上から下へ、力を入れずに優しくスライドしてください。舌の左、真ん中、右と、3ストロークでみがきます。

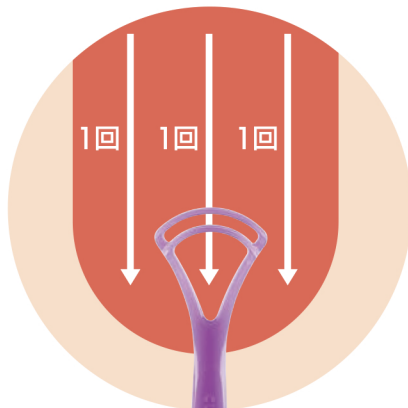

クラブロック 舌ブラシ
CTC 202

- ② 掻き取り
- ① 掻き上げ



POINT

3ストロークでみがける理由

ポイントは2層のブラシ構造。

1つ目のブラシで舌苔を掻き上げ、

2つ目のブラシで舌苔を掻き取ります。